

Active Life® Bolsas de Ostomia de Uma Peça - Infantil

Sistema de uma peça drenável e recortável para urostomia

Descrição

As **bolsas Active Life® Little Ones** são dispositivos de uma peça para urostomia compostas por uma barreira protetora de pele flexível Stomahesive® e uma bolsa coletora drenável.

As bolsas coletoras armazenam os efluentes dos estomas e a barreira protetora da pele fixa a bolsa coletora ao estoma por contato direto com a pele periestoma ao mesmo tempo em que protege a pele do contato com os efluentes.



Marca

Active Life® ConvaTec®
Stomahesive®

Composição do Produto

- **Bolsas coletoras Little Ones:** filme de cloreto de polivinilideno (PVDC) e acetato de viniltileno (EVA).
- **Barreira Protetora da Pele Stomahesive®** modificada: composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, óleo mineral e poliisobutileno. A superfície da placa é laminada com um filme de polietileno fino e transparente.
- **Torneira de Drenagem:** viniltileno.



Características e Ações do Produto

- **Proteção da pele:** substâncias hidrocolóides absorvem a umidade.
- As bolsas coletoras Little Ones são totalmente **à prova de odores**, conferem maciez e reduzem os ruídos.
- **Recortável e adaptável** a diferentes tamanhos e formatos de estoma. O guia de recorte é impresso no papel protetor, facilitando a visualização da medida desejada.
- **Bolsa transparente:** Permite a visualização do estoma, efluente e drenagens.
- **Bolsa elaborada em plástico resistente a vazamentos:** macia, segura e confortável para o paciente. Não é necessário retirar a bolsa durante o banho de banheira, chuveiro ou piscina.
- Orifício inicial que pode ser ampliado para acomodar estomas de qualquer formato e tamanho até um diâmetro máximo de 25mm.
- **Válvula anti-refluxo** de maneira que a urina possa fluir livremente para a bolsa coletora sem que retorne em direção ao estoma.
- As bolsas infantis Little Ones são projetadas especificamente para **uso pediátrico**.

Active Life® Bolsas de Ostomia de Uma Peça - Infantil

Sistema de uma peça drenável e recortável para urostomia

Recomendações de Uso

- A aplicação cuidadosa das bolsas ajudará a proteger a pele periestoma contra a irritação causada pelos efluentes.
- Limpar a pele periestoma com água e sabão e secar completamente, assegurando-se de que ela esteja livre de qualquer substância oleosa, sabão ou solvente que possam prejudicar a aderência da bolsa. A placa protetora Stomahesive adere à pele escoriada ou úmida; contudo, a borda adesiva flexível só adere à pele seca.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DA BOLSA:

- Medir o tamanho do estoma com o guia de medida que acompanha a embalagem do produto.
- Traçar o tamanho do estoma no papel branco do verso da placa protetora, centralizando ao redor do orifício inicial.
- Antes de recortar, separar as paredes da frente e de trás da bolsa a fim de evitar cortar sua parede frontal.
- Aumentar o orifício central de acordo com o tamanho desejado usando uma tesoura de ponta curva. Não recortar além do último círculo marcado no papel protetor.
- A bolsa pode permanecer aplicada enquanto estiver confortável e não houver sinais de irritação.

Advertências

Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.

- Atenção: Deve-se ter especial cuidado ao usar produtos adesivos ao redor de urostomias planas, especialmente se associada à megaureter. Em raras ocasiões, os informes clínicos têm documentado a presença de agentes adesivos no trato urinário destes pacientes. Nesses casos, deve-se avaliar a continuidade do uso do produto e iniciar tratamento clínico apropriado.
- Em caso de irritação da pele, consulte um profissional da saúde.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Não estéril	Notificação ANVISA Nº 80523020061	5 anos	Armazenar entre 10° e 30°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada.

Active Life® Bolsas de Ostomia de Uma Peça - Infantil

Sistema de uma peça drenável e recortável para urostomia

ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Característica	Unidades por caixa
20917	1002878	768455108695	265718	8 a 25 mm	15 bolsas


Fabricante Legal:

ConvaTec Limited – Reino Unido


Responsável Técnico:

Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.715


Importador:

Convatec Brasil Ltda.
CNPJ: 09.603.161/0001-44


Atendimento ao Cliente

0800-7276-115



www.convatec.com

FT-OC23

V.5

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.

Sur-Fit Advantage Bolsa Coletora Drenável

Bolsa Coletora Drenável



Descrição

As Sur-Fit Advantage Bolsas Coletoras Drenáveis são componentes essenciais do sistema (equipamento coletor) de duas peças para estomia de eliminação, projetadas para coletar efluentes de estomias intestinais. Disponíveis em versões transparentes, opacas ou com janela de visualização, as bolsas também estão disponíveis com ou sem filtro e possuem sistema de fechamento integrado.

Marca

SUR-FIT® ConvaTec®

Composição do Produto

As Sur-Fit Advantage Bolsas Coletoras Drenáveis são confeccionadas com:

- Filme de cloreto de polivinilideno (PVDC), totalmente à prova de odores e Acetato de viniletileno (EVA), que conferem maciez e reduzem os ruídos.
- Espuma de poliuretano laminada a uma tela de poliamida, tratada com carvão ativado (contendo KMnO4) e aglutinante de acrilato (preto).
- Painel de visualização: confeccionado por etileno-metil acrilato (EMA), acetato de viniletileno (EVA) e polietileno.

Características e Ações do Produto

As Bolsas Coletoras Drenáveis Sur-Fit Advantage apresentam o sistema de fechamento InvisiClose® ou clipe, proporcionando maior conforto e segurança ao usuário. Possuem suporte para cinto de sustentação e são utilizadas em conjunto com as Placas (Bases adesivas) Protetoras de Pele, que possuem adesivo hidrocoloide para proteção da pele e um anel de acoplamento plástico para o encaixe preciso das Bolsas Coletoras Drenáveis. Também possuem o Lock-It Pocket™, que oferece a flexibilidade de uma bolsa drenável com a segurança e o conforto de uma bolsa fechada. O tamanho da placa (base adesiva) protetora de pele deve ser compatível com a Sur-Fit Advantage Bolsa Coletora Drenável utilizada.

Sur-Fit Advantage Bolsa Coletora Drenável

Bolsa Coletora Drenável

Recomendações de Uso

Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.

Advertências

As advertências podem ser verificadas na Instrução de Uso.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Não estéril	Notificação ANVISA Nº 80523020087	5 anos	Armazenar entre 10 e 30°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada.

ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Características		Unidades por caixa
				Modelo	Flange	
401515	1736102	Indisponível	Indisponível	Standard Transparente	100mm	10 Unidades
416415	1738020	Indisponível	Indisponível	Opaca	38mm	10 Unidades
416417	1736099	Indisponível	Indisponível	Opaca	45mm	10 Unidades
416420	1736100	Indisponível	Indisponível	Opaca	57mm	10 Unidades
416423	1736101	Indisponível	Indisponível	Opaca	70mm	10 Unidades
421747	1732557	Indisponível	330767	Opaca com Janela de Visualização	45mm	10 Unidades
421748	1732558	Indisponível	330768	Opaca com Janela de Visualização	57mm	10 Unidades
421749	1732559	Indisponível	330769	Opaca com Janela de Visualização	70mm	10 Unidades
416416	1736772	Indisponível	Indisponível	Transparente	45mm	10 Unidades
416419	1736773	Indisponível	Indisponível	Transparente	57mm	10 Unidades
416422	1736774	Indisponível	Indisponível	Transparente	70mm	10 Unidades



Fabricante
ConvaTec Limited –
Reino Unido



Responsável Técnico
Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.715



Detentor do
Registro/Notificação
Convatec Brasil Ltda.
CNPJ: 09.603.161/0001-
44



Atendimento ao
Cliente
0800-7276-115



convatec
— forever caring —

www.convatec.com
FT-OC37
V4

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.

Sur-Fit Advantage Placas Durahesive Moldável Convexa

Placas (Bases adesivas Convexas) Durahesive Moldável



Descrição

As Sur-Fit Advantage Durahesive Placas (Bases adesivas) Protetoras de Pele Moldáveis são componentes do sistema (equipamento coletor) de duas peças para estomia de eliminação. Possuem um adesivo hidrocoloide para proteção da pele e um anel de acoplamento plástico que permite o encaixe das Bolsas Coletoras.

Marca

SUR-FIT® ConvaTec®

Composição do Produto

- As placas (bases adesivas) são confeccionadas com três camadas de proteção:
 - Adesivo Stomahesive e adesivo Durahesive (resinas sintéticas que contêm três hidrocoloides: CMC, pectina e gelatina).
 - Camada de filme de polietileno.
- As flanges são feitas de acetato de viniltileno.

Características e Ações do Produto

- Produto de uso prolongado, plano, moldável, dispensa o uso de tesoura. As Sur-Fit Advantage Durahesive Placas (Bases adesivas) Protetoras de Pele Moldáveis na cor branca contêm adesivo de apoio acrílico.
- Para garantir um encaixe adequado, a placa (base adesiva) protetora de pele deve ser utilizada com o mesmo tamanho de bolsa coletora Sur-Fit Advantage.

Recomendações de Uso

Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.

Advertências

As advertências podem ser verificadas na Instrução de Uso.

Sur-Fit Advantage Placas Durahesive Moldável Convexa

Placas (Bases adesivas Convexas) Durahesive Moldável

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Não estéril	Notificação ANVISA Nº 80523029025	5 anos	Armazenar entre 10 e 30°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada.

ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Características	Unidade s por caixa
				Modelo	Dimensões da Flange
411800	1736079	Indisponível	Indisponível	Adesivo de apoio Branco, Pequena 13-22mm	45mm
411802	1736080	Indisponível	Indisponível	Adesivo de apoio Branco, Média 22-33mm	45mm
411804	1736081	Indisponível	Indisponível	Adesivo de apoio Branco, Grande 33-45mm	57mm
411806	1736082	Indisponível	Indisponível	Adesivo de apoio Branco, Extra Grande 33x45mm por 45x56mm) forma oval	70mm



Fabricante
ConvaTec Limited –
Reino Unido



Responsável Técnico
Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.715



Detentor do
Registro/Notificação
Convatec Brasil Ltda.
CNPJ: 09.603.161/0001-
44



Atendimento ao
Cliente
0800-7276-115



convatec
— forever caring —

www.convatec.com
FT-OC44
V4

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.

Sur-Fit Advantage Placas Durahesive Moldável Convexa

Placas (Bases adesivas) Durahesive Moldável Convexa



Descrição

As Sur-Fit Advantage Durahesive Placas (Bases adesivas) Protetoras de Pele Flexíveis Moldáveis Convexas são elementos do sistema (equipamento coletor) de duas peças para estomia de eliminação, caracterizadas pelo adesivo hidrocoloide para proteção da pele e anel de acoplamento plástico que permite o encaixe das Bolsas Coletoras.

Marca

SUR-FIT® ConvaTec®

Composição do Produto

- As placas (bases adesivas) são confeccionadas com três camadas de proteção:
 - Duas camadas de adesivo Durahesive (resina sintética que contém três hidrocoloides: CMC, pectina e gelatina).
 - Uma camada de filme de polietileno.
- As flanges são feitas de acetato de viniletileno.

Características e Ações do Produto

- Produto de uso prolongado, convexo, moldável, dispensa o uso de tesoura, possui adesivo de apoio acrílico.
- Para um encaixe adequado, a placa (base adesiva) protetora de pele deve ser utilizada com o mesmo tamanho de bolsa coletora Sur-Fit Advantage.

Recomendações de Uso

Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.

Advertências

As advertências podem ser verificadas na Instrução de Uso.

Sur-Fit Advantage Placas Durahesive Moldável Convexa

Placas (Bases adesivas) Durahesive Moldável Convexa

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Não estéril	Notificação ANVISA Nº 80523029027	5 anos	Armazenar entre 10 e 30°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada.

ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Características		Unidade s por caixa
				Modelo	Dimensões da Flange	
404592	1736083	Indisponível	Indisponível	Adesivo de apoio Branco, pequena, 13-22mm	45mm	10
404593	1736084	Indisponível	Indisponível	Adesivo de apoio Branco, média, 22-33mm	45mm	10
404594	1736085	Indisponível	Indisponível	Adesivo de apoio Branco, grande, 33-45mm	57mm	10



Fabricante
ConvaTec Limited –
Reino Unido



Responsável Técnico
Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.715



Detentor do
Registro/Notificação
Convatec Brasil Ltda.
CNPJ: 09.603.161/0001-
44



Atendimento ao
Cliente
0800-7276-115



convatec
— forever caring —

www.convatec.com
FT-OC46
V3

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.

DuoDERM® CGF Curativo com Fórmula Gel Controlada

Curativo com fórmula gel controlada

Descrição

DuoDERM® CGF®, com fórmula de gel controlada, é um curativo adesivo (hidrocolóide) de contato. O curativo absorve o exsudato e promove um ambiente úmido que favorece o processo de cicatrização e auxilia na remoção de tecido desvitalizado da ferida sem danificar o tecido recém-formado.

Marca

DuoDERM® ConvaTec® CGF®



Composição do Produto

Gelatina, carboximetilcelulose sódica, pectina, poliisobutileno, borracha butílica, borracha de estireno-isopreno-estireno, metileno 3,5-di-tert-butil-4-hidroxicinamato, éster de pentaeritritol, óleo mineral e espuma de poliuretano.



Características e Ações do Produto

Os curativos hidrocolóides tem diversas propriedades:

- Produzem um ambiente úmido para ferida
- Gerenciamento de exsudato
- Facilitam o desbridamento autolítico
- Promovem uma barreira para microorganismos
- Ajudam com o manejo da dor.

Criação de um ótimo ambiente para a cicatrização:

- Os curativos hidrocolóides criam um ambiente úmido para uma cicatrização otimizada.
- Especificamente, acredita-se que os hidrocolóides promovam a angiogênese, aumentam o número de fibroblastos dérmicos, estimulam a produção de tecido de granulação e aumentam a quantidade de colágeno sintetizado.

Desbridamento autolítico:

- As propriedades de retenção de umidade dos hidrocolóides ajudam a suavizar e re-hidratar o tecido necrótico, contribuindo para o desbridamento autolítico.

Prevenção de infecção e infecção cruzada:

DuoDERM® CGF Curativo com Fórmula Gel Controlada

Curativo com fórmula gel controlada

- Os hidrocolóides são adesivos impermeáveis e podem atuar como barreira viral e bacteriana, desde que o curativo permaneça intacto e sem vazamento do exsudato. Os curativos hidrocolóides podem, portanto, ser vantajosos para uso em áreas como o sacro, que são regularmente sujeitos à contaminação.

Manejo da dor:

- O gel formado durante o uso do curativo hidrocolóide torna a remoção fácil e atraumática. Acredita-se que o ambiente úmido e oxigenado reduzido produzido pelo curativo protege as terminações nervosas e, assim, ajuda a reduzir a dor no leito da ferida.
- A espuma de poliuretano contribui no fornecimento do ambiente úmido para a ferida e auxilia na proteção da ferida contra influências do ambiente.

Proteção:

- Ele é projetado para reduzir o risco de uma maior ruptura da pele devido ao atrito, evitando o contato com a roupa / roupa de cama.
- Pode ser usado em fissuras de pele e feridas superficiais, feridas secas a levemente exsudativas, tecido ou pele recém-formado.

Recomendações de Uso

Indicações:

- abrasões;
- lacerações;
- cortes superficiais;
- queimaduras e escaldaduras;
- rachaduras de pele.

Instruções de uso:

- Selecionar um curativo que ultrapasse a borda da ferida em pelo menos 3 cm.
- Limpar a ferida de acordo com os procedimentos convencionais. Irrigar com solução salina e secar a pele adjacente para eliminar qualquer substância gordurosa.
- Retirar o papel protetor do lado de trás do curativo, minimizando o contato dos dedos com a superfície adesiva.
- Alisar o curativo com as mãos para se assegurar da sua adesão, principalmente nas bordas.
- Para melhor aderência em locais anatômicos, pode-se utilizar um adesivo hipoalergênico ao redor das bordas do curativo.

Advertências

Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.

- Os curativos DuoDERM® são estéreis e devem, portanto, ser manipulados de forma apropriada.
- O curativo DuoDERM® pode permanecer aplicado até no máximo 7 dias, desde que não haja incômodo, vazamento de exsudato ou sinais clínicos de infecção.
- O curativo deve ser avaliado com frequência para verificar se há vazamento ou desprendimento das bordas. Se ocorrer alguma destas situações, o curativo deve ser trocado. Como o curativo absorve o exsudato, o gel formado pode ser perceptível pela parte externa do curativo.

DuoDERM® CGF Curativo com Fórmula Gel Controlada

Curativo com fórmula gel controlada

- Não deve ser utilizado em indivíduos sensíveis ou que tiveram qualquer reação alérgica ao curativo ou a um dos seus componentes.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Radiação gama	Registro ANVISA 80523020010	5 anos	Armazenar entre 10 e 25°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada.

ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Característica	Unidades por caixa
187660	1704761	768455106974	265748	10 x 10 cm	5
187643	1704757	768455102693	265750	15 x 20 cm	5
187662	1704763	786455106981	265752	20 x 20 cm	5


Fabricante Legal:

ConvaTec Limited – Reino Unido


Responsável Técnico:

Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.715


Importador:

Convatec Brasil Ltda.
CNPJ: 09.603.161/0001-44


Atendimento ao Cliente

0800-7276-115



www.convatec.com

FT-AWC23

V.5

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.


Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.

Aquacel® Foam Pro Curativo Adesivo de Espuma e Tecnologia Hydrofiber®

Curativo adesivo de espuma e hidrofibra 100% carboximetilcelulose sódica

Descrição

AQUACEL® Foam Pro - Curativo Adesivo de Espuma e Tecnologia Hydrofiber® é um curativo estéril, de espuma e Tecnologia Hydrofiber® para feridas, constituído por um filme externo impermeável de poliuretano e uma almofada multicamadas absorvente com silicone adesivo perfurado. A almofada multicamadas absorvente é composta por uma camada de espuma de poliuretano, uma camada de ligação e uma camada não tecido de Hydrofiber® (100% carboximetilcelulose sódica) e silicone adesivo perfurado de contato com a ferida.

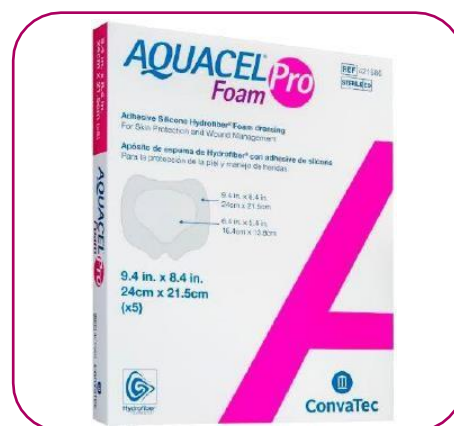

Marca

Aquacel® Hydrofiber® ConvaTec®

Composição do Produto

- **Filme de Poliuretano:** camada de adesivo impermeável (Isopropanol, Acetato de etila, Heptano e Tolueno);
- **Espuma:** espuma de poliuretano absorvente;
- **Camada de poliuretano aromático termoplástico:** liga a espuma e a camada de Hydrofiber®; Hidrofibra: fibras de 100% carboximetilcelulose sódica;
- **Silicone:** silicone adesivo perfurado, composto por 100% silicone.
- **Processo de esterilização:** óxido de Etileno.




Características e Ações do Produto

- **Tecnologia Hydrofiber®:** forma um gel macio e coeso que se molda intimamente à superfície da ferida, mantém um ambiente úmido no leito da ferida (auxiliando no processo de cicatrização do organismo) e ajuda na remoção do tecido necrótico (desbridamento autolítico) sem traumatizar o leito da ferida.
- **Camada externa de filme de poliuretano:** fornece uma barreira impermeável a vírus e bactérias que protege a ferida de contaminantes externos, reduzindo o risco de infecção. Este filme também ajuda a controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo.
- **Camada de contato:** o silicone adesivo perfurado permite uma remoção atraumática do curativo.
 - Camada externa de filme de poliuretano impermeável.
 - Almofada multicamadas absorvente (Camada de poliuretano e camada de Hydrofiber™ - Aquacel).
 - Camada de silicone adesivo perfurado.

Aquacel® Foam Pro Curativo Adesivo de Espuma e Tecnologia Hydrofiber®

Curativo adesivo de espuma e hidrofibra 100% carboximetilcelulose sódica

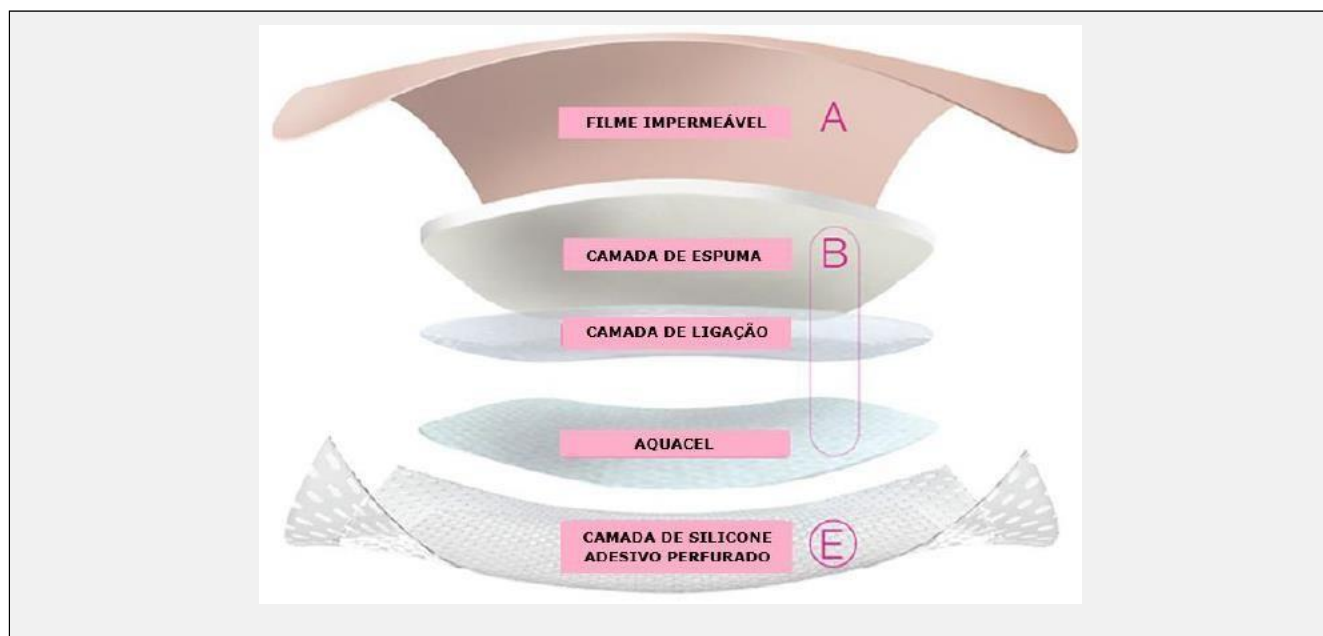

Recomendações de Uso

O curativo Aquacel® FOAM Pro pode ser utilizado em:

- Abrasões
- Lacerações
- Cortes mínimos

Sob a supervisão de um profissional da saúde, curativo Aquacel® FOAM Pro pode ser usado no tratamento de feridas crônicas e agudas, tais como:

- Úlceras de perna, lesão por pressão (estágio 2 - 4) e úlceras diabéticas;
- Feridas cirúrgicas (pós-operatórias, áreas doadoras, dermatológicas);
- Queimaduras de profundidade parcial (segundo grau);
- Feridas cirúrgicas ou traumáticas deixadas para cicatrizar por segunda intenção, tais como incisões cirúrgicas deiscências;
- Feridas cirúrgicas que cicatrizam por primeira intenção, tais como incisões cirúrgicas e dermatológicas (ex.: ortopédica e vascular);
- Tratamento local de feridas que sangram facilmente, tais como feridas que passaram por desbridamento mecânico ou cirúrgico e áreas doadoras.
- Curativo Aquacel® FOAM Pro pode ser incluído em um protocolo de prevenção e proteção contra lesões na pele.

Aquacel® Foam Pro Curativo Adesivo de Espuma e Tecnologia Hydrofiber®

Curativo adesivo de espuma e hidrofibra 100% carboximetilcelulose sódica

Advertências

Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem para verificar as contraindicações e precauções.

- O curativo Aquacel® FOAM Pro não deve ser usado em indivíduos que sejam sensíveis ou que tenham apresentado uma reação alérgica ao curativo ou a seus componentes.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Óxido de Etileno.	Registro ANVISA Nº 80523020068	5 anos	Armazenar em temperatura entre 10°C e 25°C. Proteger da luz. Manter em local seco.

ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Características		Unidades por caixa
				Tamanho	Tamanho da Janela Central	
421579	1714052	Indisponível	0307017	20 X 16,9 cm	11,4 X 13,5 cm	5
421580	1714053	Indisponível	0307018	24 X 21,5 cm	16,4 X 13,8 cm	5
422356	1724190	Indisponível	Indisponível	19.8 cm x 14 cm	14 cm x 8.7 cm	10
422357	1724191	Indisponível	Indisponível	10 cm x 10 cm	6.5 cm x 6.5 cm	10
422358	1724192	Indisponível	Indisponível	15 cm x 15 cm	11 cm x 11 cm	10
422359	Indisponível	Indisponível	Indisponível	8 cm x 8 cm	5 cm x 5 cm	10



Fabricante Legal:
ConvaTec Limited – Reino Unido



Responsável Técnico:
Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.715



Importador:
Convatec Brasil Ltda.
CNPJ: 09.603.161/0001-44



Atendimento ao Cliente
0800-7276-115



www.convatec.com
FT-AWC21
V.7

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.

Convamax Curativo Superabsorvente

Curativo Superabsorvente não adesivo



Descrição

O Convamax Curativo Superabsorvente não adesivo é uma cobertura estéril, para uso em feridas com forte exsudação e que possui 3 camadas, sendo: uma camada de polipropileno, permeável ao vapor e resistente à água, que atua como uma barreira de proteção, uma camada intermediária de almofada superabsorvente (SAP) e uma camada de fibra absorvente adaptável, que auxilia no contato íntimo com a ferida. A construção do curativo, em 3 camadas, facilita o gerenciamento de fluido fornecendo um ambiente com umidade ideal para a cicatrização. Além disso, a almofada superabsorvente fornece absorção superior, evitando o contato dos exsudatos e gerenciando as metaloproteinases de matriz, que interferem na cicatrização de feridas. Com isso, é minimizado o risco de maceração e danos à pele peri-ferida, o que promove um fechamento mais rápido da mesma.

O Convamax Curativo Superabsorvente não adesivo foi autorizado pela ANVISA enquadrado na classe de risco III e por isso, pode ser usado, com segurança, em feridas abertas e que só cicatrizam por segunda intenção. Além disso, Convamax é produzido em uma planta produtiva certificada pela ANVISA conforme os critérios de Boas Práticas de Fabricação de Dispositivos Médicos estabelecidos pela RDC nº 665 de 2022, o que garante elevado nível de qualidade e segurança.

Marca

Convamax

Composição do Produto

Polipropileno, Partículas de celulose e poliacrilato de sódio.

Características e Ações do Produto

A construção do curativo, em 3 camadas, facilita o gerenciamento de fluido fornecendo um ambiente com umidade ideal para a cicatrização. Além disso, a almofada superabsorvente, de partículas de celulose e poliacrilato de sódio é capaz de absorver um mínimo de 172 g/100 cm² podendo chegar até 181 g/100 cm², o que evita o contato dos exsudatos com a ferida e permite o gerenciamento das metaloproteinases de matriz.

Convamax Curativo Superabsorvente

Curativo Superabsorvente não adesivo

Com isso, é minimizado o risco de maceração e danos à pele peri-ferida, o que promove um fechamento mais rápido da mesma.

Recomendações de Uso

- Úlceras de pressão
- Úlceras de perna
- Úlceras nos pés diabéticos
- Feridas cirúrgicas abertas

Advertências

Não reutilize. Não utilizar caso a embalagem tenha sido previamente aberta ou violada, pois isto pode prejudicar a esterilização do item;
Não corte o curativo, as camadas devem permanecer intactas.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Óxido de Etileno	Registro ANVISA 80523020091	3 anos	Armazenar em locais com a temperatura entre 5 e 25°C. Proteger da luz. Manter seco.

ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Característica	Unidades por caixa
422566	1727554			7.5 X 7.5CM	10
422567	1727555			10 X 10CM	10
422568	1727556			10 X 20CM	10
422569	1727557			12.5 X 12.5CM	10
422570	1727558			15 X 15CM	10
422571	1727559			15 X 20CM	10
422572	1727560			20 X 20CM	10
422573	1727561			20 X 30CM	10
422574	1727562			20 X 40CM	10



Fabricante:
HuiZhou Foryou
Medical Devices Co.,
Ltd.



Responsável Técnico:
Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.716



**Detentor do
Registro/Notificação:**
Convatec Brasil Ltda.



**Atendimento ao
Cliente**
0800-7276-115



www.convatec.com
FT-AWC25 V1

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da Convatec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo Convatec.

Curativo Convafoam de Espuma e Hydrofiber Não Adesivo

Curativo de Espuma e Hydrofiber Não Adesivo



Descrição

Os Curativos Convafoam de espuma e Hydrofiber não adesivos são uma variedade de curativos estéreis de hidrofibra, espuma e fibras de absorção aprimorada, que consistem em:

- Um filme externo de poliuretano com adesivo acrílico revestido, respirável, resistente à água, que fornece uma barreira bacteriana e viral;
- Uma almofada central, absorvente, macia e multicamadas, contendo fibras superabsorventes, espuma de poliuretano e camada de contato com a ferida de Hydrofiber (carboximetilcelulose de sódio).

A camada externa de filme fornece uma barreira impermeável, viral e bacteriana que protege a ferida de contaminantes externos, reduzindo o risco de infecção. O filme também ajuda a controlar a transmissão do vapor de umidade do exsudato absorvido pelo curativo. A almofada de Hydrofiber®, camada de fibra de absorção e os materiais de espuma de poliuretano dentro da almofada absorvem grandes quantidades de fluidos (exsudato) e bactérias da ferida, além de reter umidade.

Marca

Convafoam

Composição do Produto

O Curativo Convafoam de espuma e Hydrofiber não adesivo possui 6 camadas que são compostas de:

1. Filme externo de poliuretano revestido de adesivo acrílico padrão, resistente à água;
2. Espuma/ almofada de poliuretano;
3. Adesivo de revestimento de dispersão (policaprolactona);
4. Camada de Fibras superabsorventes (40% de poliacrilato de sódio e 60% de poliéster);
5. Adesivo de revestimento de dispersão (policaprolactona);
6. Camada de Hydrofiber® (Carboximetilcelulose de Sódio).

Curativo Convafoam de Espuma e Hydrofiber Não Adesivo

Curativo de Espuma e Hydrofiber Não Adesivo

Características e Ações do Produto

Os Convafoam curativos de espuma e Hydrofiber não adesivos podem ser utilizados após a consulta de um profissional da saúde, para o tratamento de feridas exsudativas e não exsudativas e proteção da pele intacta. Podem ser utilizados como curativos primários e secundários. Podem ser cortados em qualquer formato ou tamanho sem risco de desmoronamento ou migração de partículas para o leito da ferida.

Os Curativos Convafoam de espuma e Hydrofiber não adesivos são destinados a ser utilizados em pacientes com um dos tipos de feridas listadas nas indicações ou naqueles que requerem proteção da pele contra danos. Os Curativos Convafoam de espuma e Hydrofiber não adesivos podem ser utilizados por até 7 dias. Os curativos devem ser trocados antes desse período, caso seja clinicamente indicado.

É seguro utilizar os Curativos Convafoam de espuma e Hydrofiber não adesivos pelo tempo que for necessário o tratamento.

Recomendações de Uso

Os Curativos Convafoam de espuma e Hydrofiber não adesivos são indicados para o tratamento de:

- Úlcera de perna;
- Úlcera por pressão;
- Úlcera de pé diabético;
- Feridas cirúrgicas;
- Feridas traumáticas.

Advertências

Os Curativos Convafoam de espuma e Hydrofiber não adesivos não devem ser usados em indivíduos sensíveis ou que tiveram uma reação alérgica ao curativo ou aos componentes mencionados na descrição do produto. Os Curativos Convafoam de espuma e Hydrofiber não adesivos não são compatíveis com agentes oxidantes, como peróxido de hidrogênio ou soluções de hipoclorito.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Óxido de Etileno	Registro ANVISA Nº 80523020099	3 anos	Armazenar em temperatura entre 10 e 25°C. Proteger da luz. Manter seco.

ICC	SAP	EAN	SIMPRO	Característica	Unidades por caixa
423355	1733679	Indisponível	Indisponível	Tamanho do Curativo	10
423357	1733684	Indisponível	Indisponível	10cm x 10cm	5
				15cm x 15cm	

Curativo Convafoam de Espuma e Hydrofiber Não Adesivo

Curativo de Espuma e Hydrofiber Não Adesivo



Fabricante:
Convatec Limited-
Reino Unido



Responsável Técnico:
Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.716



**Detentor do
Registro/Notificação:**
Convatec Brasil Ltda.
CNPJ:
09.603.161/0001-45



**Atendimento ao
Cliente**
0800-7276-115



convatec
— forever caring —

www.convatec.com
FT-AWC 28
V0

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.
Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.
Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.

Sur-Fit Advantage Bolsa de Urostomia com Válvula Accuseal

Bolsa de Urostomia com Válvula Accuseal



Descrição

As bolsas Sur-Fit Advantage de Urostomia com Válvula Accuseal são elementos do sistema (equipamento coletor) de duas peças para urostomias, desenvolvidas para coletar urina.

Marca

SUR-FIT® ConvaTec®

Composição do Produto

As bolsas Sur-Fit Advantage de Urostomia com Válvula Accuseal são confeccionadas com:

- Filme de cloreto de polivinilideno (PVDC), totalmente à prova de odores e acetato de viniletileno (EVA), que conferem maciez e reduzem os ruídos.
- Válvula accuseal: Poliéster, acetato de viniletileno (EVA), Nylon e Neopreno.

Características e Ações do Produto

As bolsas de urostomia são transparentes, parcialmente revestidas com tela macia, possuem válvula antirrefluxo, torneira para drenagem com válvula AccuSeal, sistema de segurança com sinalização visual, adaptador universal para drenagem noturna e sistema de encaixe com suporte para cinto de sustentação. Utilizadas em conjunto com as Placas (Bases adesivas) Protetoras de Pele, que apresentam adesivo hidrocoloide para proteção da pele e um anel de acoplamento plástico que permite o encaixe das Bolsas Coletoras. A placa (base adesiva) protetora de pele deve ser do mesmo tamanho da Sur-Fit Advantage Bolsa de Urostomia com Válvula Accuseal para assegurar o encaixe adequado.

Recomendações de Uso

Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.

Sur-Fit Advantage Bolsa de Urostomia com Válvula Accuseal

Bolsa de Urostomia com Válvula Accuseal

Advertências

As advertências podem ser verificadas na Instrução de Uso.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Não estéril	Notificação ANVISA Nº 80523020090	5 anos	Armazenar entre 10 e 30°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada.

ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Característica	Unidades por caixa
401544	1736597	Indisponível	Indisponível	Transparente com válvula Accuseal 45mm	10 Unidades
401545	1736598	Indisponível	Indisponível	Transparente com válvula Accuseal 57mm	10 Unidades



Fabricante:
ConvaTec Limited –
Reino Unido



Responsável Técnico:
Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.715



Detentor do
Registro/Notificação:
Convatec Brasil Ltda.
CNPJ:
09.603.161/0001-44



Atendimento ao
Cliente
0800-7276-115



www.convatec.com
FT-OC39
V4

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.
Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2026

SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - PROCESSO Nº 6733/2026

EDITAL Nº 50/2026

CREDENCIAMENTO

Convatec Brasil Ltda., com sede a Avenida Francisco Roveri 1413 – Galpão A – Parte C Lote GLB3A2C – Parque Almerinda Chaves - Jundiaí, SP CEP: 13212-541 – Brasil - CNPJ 09.603.161/0004-97 , titular do registro dos produtos correlatos da marca Convatec, por seu representante legal abaixo qualificado, credencia, sem exclusividade, a empresa **CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**, sediada a **AVENIDA ALEXANDER GRAHAN BELL, 200 - BLOCO C UNID C03 COND EMP GRAHAM BELL – BAIRRO: TECHNO PARK - CEP: 13.069-310 – CAMPINAS – SP** , inscrita no CNPJ n.º 07.569.029/0001-38, a apresentar proposta de preços e comercializar os produtos da marca Convatec destinado ao **Pregão Eletrônico Nº 031/2026, REGISTRO DE PREÇOS Nº 6733/2026 – EDITAL Nº 50/2026**, promovido por este órgão público **Prefeitura Municipal de Capão Bonito**.

Por ser verdade, firmamos a presente.

São Paulo, 15 de Junho de 2026

Convatec Brasil Ltda.

Cristina Todaro de Freitas – Analista de Licitação

RG: 29.301.894-7 – CPF: 267.945.818-41

CONVATEC BRASIL LTDA

Filial : Avenida Francisco Roveri 1413 – Galpão A – Parte C Lote GLB3A2C – Parque Almerinda Chaves - Jundiaí, SP - CEP: 13212-541 – Brasil

Matriz : Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 50 - Vila Nova Conceição - São Paulo – SP – CEP: 04543-000 - Brasil

CNPJ Filial : 09.603.161/0004-97 – CNPJ Matriz : 09.603.161/0001-44

Tel.: (011) 3529-1821/ 3529-1812 - 99104-2285

www.convatec.com.br